

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

SteadyTemp



©SteadySense GmbH,
Kärntner Straße 518,
8054 Seiersberg-Pirka, Austria
IFU Έκδοση: 22_03,
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-01



Απαιτείται NFC



ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:



Αριθμός Χώρας



Κατασκευαστής



Ημερομηνία λήξης




Ιατρική συσκευή



Προϊόν μίας χρήσης



Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα

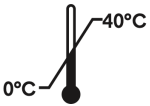

Αποθήκευση Θερμοκρασίας



Τηρείτε τους όρους χρήσεως (www.steadytemp.health/ifu)



Οδηγίες ασφαλείας



Πληροφορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το SteadyTemp και τηρήστε τις.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το SteadyTemp είναι ένα κλινικό θερμόμετρο που προορίζεται για τη συνεχή μέτρηση της μασχαλιαίας θερμοκρασίας και για την απεικόνιση των σχετικών μεταβολών της μασχαλιαίας θερμοκρασίας στο χρήστη.

Το σύστημα SteadyTemp μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες υγείας σε κλινικά περιβάλλοντα και από καταναλωτές σε περιβάλλον οικιακής φροντίδας. Προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας άνω των 5 ετών.

Το σύστημα αποτελείται από ένα αυτοκόλλητο αισθητήρα και μια εφαρμογή στο κινητό, τα δεδομένα θερμοκρασίας σώματος που μετρώνται από τον αισθητήρα μεταδίδονται μέσω Near Field Communication και στη συνέχεια εμφανίζεται στην εφαρμογή του κινητού

Προφυλάξεις



Το σύστημα SteadyTemp δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Καταστάσεις έκτακτης
- ανάγκης Γνωστή αλλεργία στα συστατικά του δέρματος
- Πληγές, δερματικές παθήσεις στην περιοχή της εφαρμογής του επιθέματος SteadyTemp



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το SteadyTemp δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 5 ετών
- Το SteadyTemp δεν υποκαθιστά τη συνάντηση με έναν ιατρό.
- Το έμπλαστρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν σωστά τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το επίθεμα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη μέτρηση της μασχालιαίας θερμοκρασίας.
- Οι μετρούμενες τιμές θερμοκρασίας επεξεργάζονται από το SteadyTemp για σκοπούς απεικόνισης.
- Μην χρησιμοποιείτε το επίθεμα περισσότερες από μία φορές, είναι προϊόν μιας χρήσης.
- Μην εφαρμόζετε το επίθεμα σε τραυματισμένο δέρμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το επίθεμα εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει μολυνθεί.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να ανοίξετε το επίθεμα. Μην διπλώνετε ή στρίβετε το έμπλαστρο SteadyTemp.
- Μην εφαρμόζετε διαδοχικά επιθέματα στην ίδια πλευρά του σώματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το έμπλαστρο κατά την εξέταση MR ή CT
- Μην πετάτε το έμπλαστρο στα κανονικά οικιακά απορρίμματα
- Μην πετάτε το έμπλαστρο στη φωτιά, η μπαταρία θα μπορούσε να εκραγεί
- Μην φοράτε το έμπλαστρο για περισσότερο από 7 ημέρες
- Αποθηκεύστε το έμπλαστρο μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και ηλικιωμένους
- Εάν το έμπλαστρο γίνει δυσάρεστο, αφαιρέστε το αμέσως
- Το έμπλαστρο SteadyTemp δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και ή γνώσης, εκτός εάν έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή

- Το έμπλαστρο πρέπει να φορεθεί στη σωστή θέση κάτω από το βραχίονα για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη ένδειξη θερμοκρασίας
- Χρησιμοποιήστε το έμπλαστρο μόνο εντός των καθορισμένων συνθηκών λειτουργίας, καθώς η λειτουργία εκτός των καθορισμένων συνθηκών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμπλαστρο και να προκαλέσει ασυμφωνίες στην ακρίβεια των μετρήσεων
- Μην κάνετε εκτεταμένο μπάνιο και μην κολυμπάτε ενώ φοράτε το έμπλαστρο
- Το έμπλαστρο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
- Όταν εφαρμόζεται, το έμπλαστρο μπορεί να προκαλέσει τοπικούς και προσωρινούς ερεθισμούς του δέρματος
- Η αυξημένη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος (για παράδειγμα λόγω εμβολιασμού) μπορεί να προκαλέσει προσωρινές δερματικές αντιδράσεις στην περιοχή εφαρμογής του επιθέματος. Αφαιρέστε το επίθεμα αμέσως εάν το επίθεμα αισθάνεστε άβολα.



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πριν εφαρμόσετε το έμπλαστρο, πλύνετε με μη λιπαρό σαπούνι και στεγνώστε καλά το δέρμα κάτω από το βραχίονα. Η περιοχή εφαρμογής του επιθέματος μπορεί επίσης να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι με οινόπνευμα
- Μην χρησιμοποιείτε αποσμητικό ή κρέμα εκ των προτέρων
- Όταν εφαρμόζετε το έμπλαστρο, αφαιρέστε πρώτα το μικρό μέρος του φύλλου μεταφοράς
- Μην αγγίζετε την αυτοκόλλητη πλευρά του επιθέματος, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητά του
- Αφού εφαρμόσετε το έμπλαστρο, εξομαλύνετε απαλά από όλες τις πλευρές για να το διορθώσετε σε σωστή θέση
- Το έμπλαστρο πρέπει να διαβάζεται μέσω NFC τουλάχιστον μία φορά την ημέρα
- Κρατήστε το κινητό σας όσο το δυνατόν πιο ακίνητα ενώ ενεργοποιείτε και διαβάζετε το έμπλαστρο
- Αφαιρέστε αμέσως το έμπλαστρο εάν γίνει δυσάρεστο ή προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος
- Μην ασκείτε σωματικά με έντονο άθλημα ή άλλες δραστηριότητες που προκαλούν υπερβολική εφίδρωση (σάουνα ή ατμόλουτρο) ενώ φοράτε το έμπλαστρο
- Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εμφανίζονται μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του σώματος, οι οποίες εμφανίζονται από τη συνεχή μέτρηση



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Για ερωτήσεις ή προβλήματα με το προϊόν παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί

μας μέσω e-mail: support@steadysense.at

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ



1. Εφαρμογή αυτοκόλλητου

Καθαρίστε την περιοχή εφαρμογής του επιθέματος πριν τοποθετήσετε το SteadyTemp Patch. Το επίθεμα πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρό και στεγνό δέρμα, χωρίς κρέμα ή αποσμητικό. Η περιοχή εφαρμογής μπορεί επίσης να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα.




Στη συσκευασία του προϊόντος SteadyTemp θα βρείτε έναν γρήγορο οδηγό για το πώς να εφαρμόσετε το επίθεμα.

Βήμα 1: Βρείτε τη θέση: Χαλαρώστε τον ώμο σας, τοποθετήστε το χέρι σας στο γοφό σας και βάλτε 3 δάχτυλα κάτω από τη μασχάλη σας. Αυτό θα καθορίσει τη θέση του επιθέματος, παρακαλούμε να το θυμάστε.



Βήμα 2: Αφαιρέστε το μικρό φύλλο μεταφοράς: Αφαιρέστε το μικρό μέρος του φύλλου μεταφοράς, ώστε να μπορέσετε να εφαρμόσετε το επίθεμα στα επόμενα βήματα.

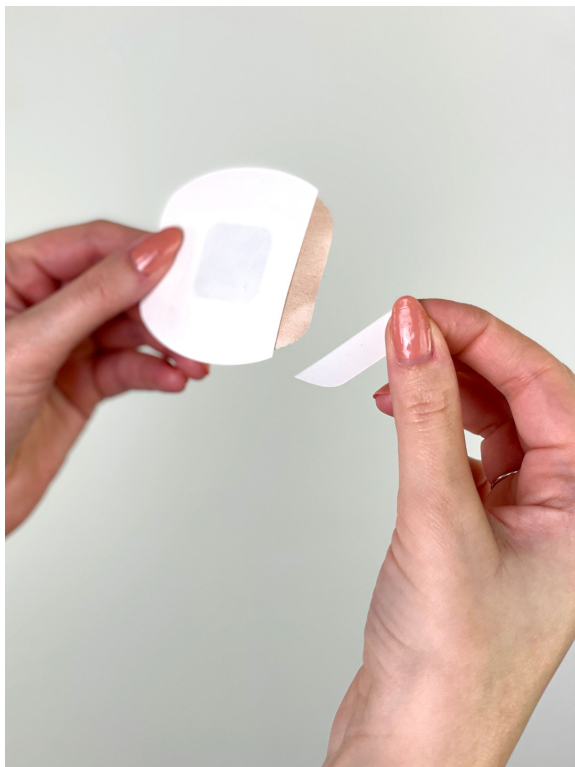


Βήμα 3: Στάση τοποθέτησης patch-εφαρμογής: Τώρα βάλτε ξανά το ένα χέρι στο γοφό σας και χαλαρώστε τον ώμο σας. Το βήμα 4 περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής του επιθέματος.



Βήμα 4: Συνδέστε το αυτοκόλλητο: Τώρα τοποθετήστε το επίθεμα στην προηγουμένως καθορισμένη θέση. Το έμπλαστρο πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το άνω άκρο του επιθέματος να βρίσκεται 3 δάχτυλα πλάτος κάτω από τη μασχάλη σας, στο πλάι σας, μεταξύ πλάτης και στήθους. Βεβαιωθείτε ότι κατά την εφαρμογή, ο ώμος σας είναι σε χαλαρή θέση και το χέρι σας στηρίζεται στο γοφό σας. Στη συνέχεια, τραβήξτε το υπόλοιπο τμήμα του φύλλου μεταφοράς και εξομαλύνετε απαλά το επίθεμα από όλες τις πλευρές.



Hint: Συμβουλή: Κολλήστε το επίθεμα έτσι ώστε οι στρογγυλεμένες πλευρές να δείχνουν προς τα πάνω και προς τα κάτω.

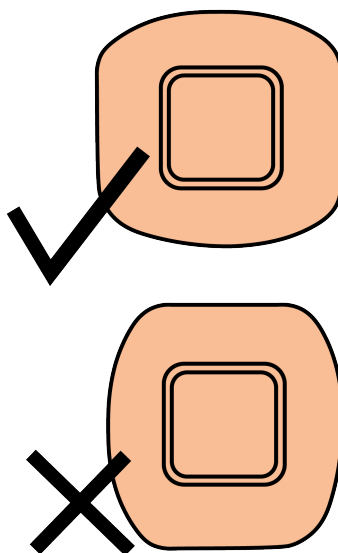




2. Ενεργοποίηση

Μετά από 10 λεπτά μπορείτε να ενεργοποιήσετε το έμπλαστρο. Η ενεργοποίηση ενημερωμένης έκδοσης κώδικα είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. Πατήστε στο εικονίδιο ενημέρωσης στην εφαρμογή και κρατήστε το πίσω μέρος του κινητού σας απέναντι στο αυτοκόλλητο για να συνδέσετε το αυτοκόλλητο με έναν χρήστη. Μετά τη σύνδεση, κρατήστε το πίσω μέρος του κινητού σας πάνω στο έμπλαστρο για να το ενεργοποιήσετε μια δόνηση θα επιβεβαιώσει την επιτυχή ενεργοποίηση.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο τα smartphones Apple ή Android θα πρέπει να συγκρατούνται στο επίθεμα για τη σωστή επικοινωνία NFC.

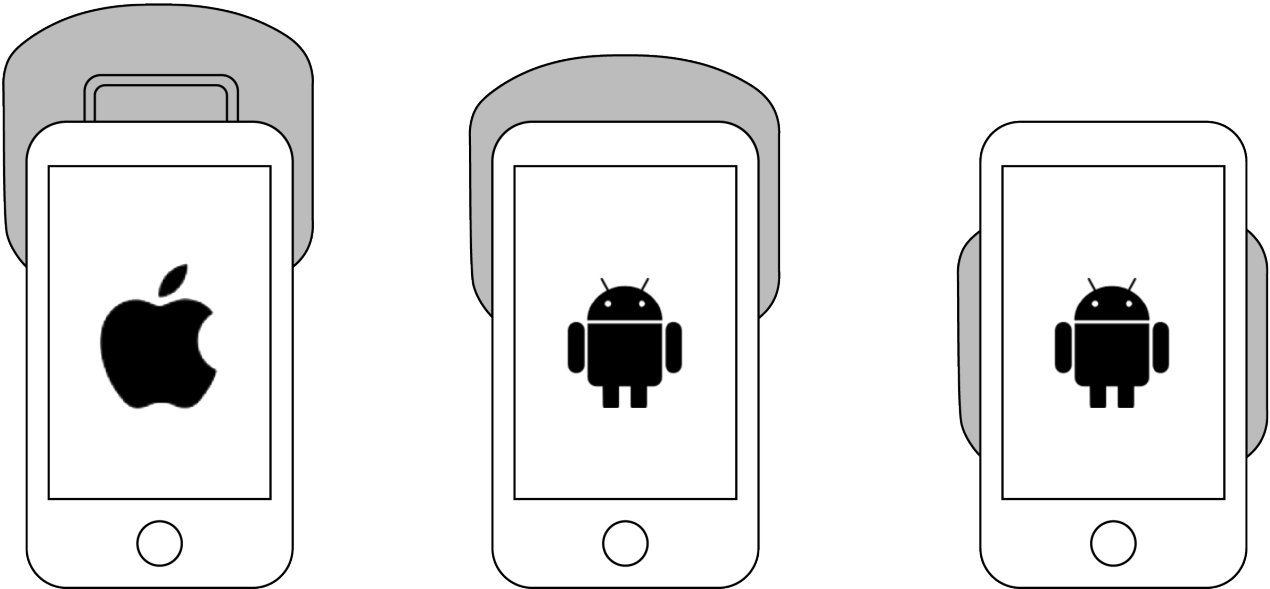


Μετά την εφαρμογή του επιθέματος, το επίθεμα πρέπει να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του σώματος. Οι πρώτες αξιόπιστες τιμές είναι διαθέσιμες 1 ώρα μετά την ενεργοποίηση του επιθέματος.



3. Ενημέρωση

Μετά την επιτυχή μεταφορά δεδομένων, η εφαρμογή εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία του σώματός σας και τις αποθηκευμένες καμπύλες θερμοκρασίας, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες θερμοκρασίας. Λάβετε υπόψη ότι οι μετρούμενες τιμές θερμοκρασίας επεξεργάζονται από το SteadyTempr για σκοπούς εμφάνισης.

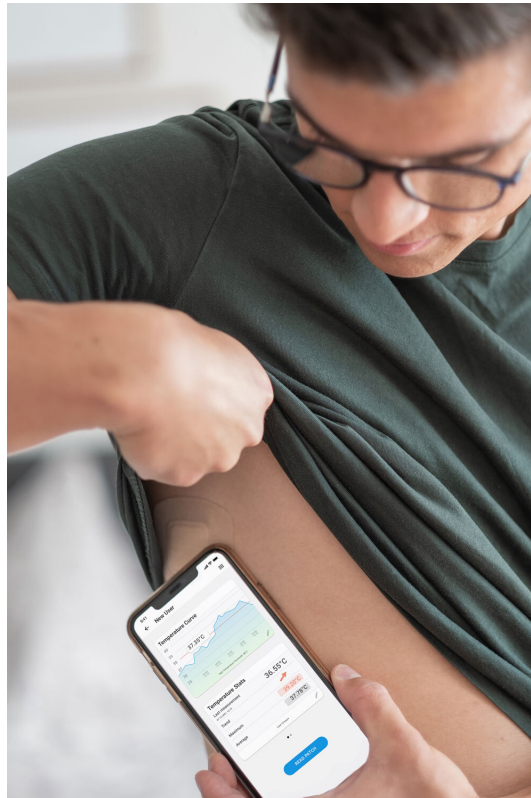

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι ειδοποιήσεις εφαρμογών σχετικά με ασυνήθιστες τιμές θερμοκρασίας σώματος μπορούν προσωρινά να εμφανιστούν λόγω ακραίων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εάν συμβαίνει αυτό, ελέγξτε αν το έμπλαστρο είναι ακόμη σωστά συνδεδεμένο και ενημερώστε το ξανά μετά από λίγο. Εάν το πρόβλημα παραμένει για περισσότερο από 6 ώρες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη μέσω E Mail: support@steadysense.at

Ειδοποίηση: «Θερμοκρασία εκτός εύρους»

Εάν η τρέχουσα μετρούμενη θερμοκρασία βρίσκεται εκτός του καθορισμένου εύρους μέτρησης, τότε δεν θα εμφανιστεί στο διάγραμμα θερμοκρασίας. Στο πεδίο: "Τελευταία μέτρηση", θα εμφανιστεί είτε το "Lo" για χαμηλή θερμοκρασία είτε το "Hi" για υψηλή θερμοκρασία.

Ειδοποίηση: "Ειδοποίηση κατωφλίου"

Εάν τα καταγεγραμμένα δεδομένα θερμοκρασίας υπερβούν το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας για μεγαλύτερη διάρκεια, η εφαρμογή θα εμφανίσει μια ειδοποίηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η διαχείριση χρήστη εμφανίζεται όταν ανοίγει η εφαρμογή SteadyTemp. Στη διαχείριση χρηστών μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ χρηστών πατώντας το εικονίδιο "Νέος χρήστης" και να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε υπάρχοντα προφίλ χρηστών πατώντας παρατεταμένα το προφίλ χρήστη για 1 δευτερόλεπτο. Για να προβάλετε τα δεδομένα θερμοκρασίας ενός χρήστη, πατήστε σε ένα υπάρχον προφίλ χρήστη.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Το έμπλαστρο τροφοδοτείται από μια μπαταρία με κουμπιά και ως εκ τούτου θεωρείται ηλεκτρονική συσκευή. Δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απορριμμάτων για μπαταρίες και ηλεκτρικά είδη. Η συσκευασία SteadyTemp είναι ανακυκλώσιμη και μπορεί να απορριφθεί στον κάδο χαρτιού.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Τύπος συσκευής: Κλινικό θερμόμετρο
- Τοποθεσία μέτρησης: Μασχάλη
- Τύπος χρήσης: Προϊόν μίας χρήσης
- Τυπική διάρκεια εφαρμογής: 7 ημέρες
- Εύρος μέτρησης: + 30 έως + 42 °C
- Ακρίβεια μέτρησης: Το SteadyTemp εμφανίζει τις σχετικές μεταβολές της μασχαλιαίας θερμοκρασίας με μέγιστη απόκλιση +/-0,3°C.
- Τρόπος λειτουργίας: Άμεση λειτουργία, συνεχής
- Διάστημα μέτρησης/χρονική απόκριση: 300 δευτερόλεπτα
- Συνθήκες λειτουργίας:
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος + 15 έως + 42 °C,
 - 15 έως 95% RH,
 - πίεση αέρα: 86 έως 106 kPa
- Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης:
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 έως +40°C,
 - 15 έως 95% RH,
 - πίεση αέρα: 86 έως 106 kPa
- Απαιτήσεις συστήματος:
 - Apple: iOS 13 ή νεότερη έκδοση στο iPhone 7 ή νεότερα μοντέλα,
 - Android: Android OS 6
- Διαστάσεις: 65 x 60 x 3 mm
- Βάρος: 3 g
- Πηγή ισχύος: Μπαταρία 3V με μπαταρία διοξειδίου του μαγγανίου (μη αντικαταστάσιμη)
- IP Classification: IPX5: Προστασία από πίδακες νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση